

TONIMER ISOTONIC NORMAL/BABYSPRAY 300 LETTERATURA EXPORT 1 M30078900	
CODICE DATA FORNITORE	M30078900 13 05 2024 DERMOFARM
NUOVO IMPIANTO 13 05 2024 23 05 2024 modifiche greco 28 05 2027 correzione portoghese 21 06 2024 modifiche ed avvertenze 24 06 2024 modifiche testo greco e Pt - ed 06/2024	

TONIMER

ISOTONIC SPRAY 300 m0sm/kg

EN_INDICATIONS

Sterile isotonic sea water solution with a slightly alkaline pH, indicated to remove and fluidify the mucus in the nasal passages in case of dryness of the mucous membranes and colds, thus facilitating more comfortable breathing. It contains no preservatives and does not disperse propellant (air), as it is not in contact with the product, thus reducing the possibility of allergic reactions.

The product is indicated:

- in TONIMER NORMAL ISOTONIC SPRAY and TONIMER STRONG ISOTONIC SPRAY presentations for adults;
- in TONIMER SOFT ISOTONIC SPRAY presentation for adults with hypersensitive mucous membranes;
- in TONIMER ISOTONIC BABY SPRAY presentation for newborns and children.

The presence of the non-return valve and a sac that isolates the physiological solution:

- guarantees sterility;
- makes it possible to use the bottle in any direction (360°);
- prevents mucus from being sucked into the bottle.

DIRECTIONS FOR USE:


wash your hands before use.

1. Once the cap is removed, children who are able to use the product on their own (under adult supervision) may do so by tilting the bottle at any angle. It is best applied by leaning over a washbasin, tilting the head to one side and inserting the spray nozzle into the upper nostril. Press on the nozzle till the product is sprayed for the recommended time (see dispensing times and frequency of use). Repeat the same procedure in the other nostril (drawing 1).
2. For newborns and children requiring adult assistance: lie the child on its side, insert the nozzle into the upper nostril and press for the recommended time. Turn the child onto its other side and repeat the same procedure in the other nostril (drawing 2).
3. After use, always wash and dry the nozzle and close the container using the cap supplied.

DISPENSING TIMES AND FREQUENCY OF USE:

- TONIMER NORMAL ISOTONIC SPRAY (adults): press on the dispenser for 1-2 seconds /nostril. The recommended frequency is 2-3 applications a day, 3-4 hours apart for 15 days, or according to medical advice.
- TONIMER SOFT ISOTONIC SPRAY (adults): press on the dispenser for 5 seconds /nostril. The recommended frequency is 2-3 applications a day, 3-4 hours apart for 15 days, or according to medical advice.
- TONIMER STRONG ISOTONIC SPRAY (adults): press on the dispenser for 1 second /nostril. The recommended frequency is 2-3 applications a day, 3-4 hours apart for 15 days, or according to medical advice.
- TONIMER ISOTONIC BABY SPRAY (newborns and children): press on the dispenser for 5 seconds /nostril. The recommended frequency is 2-3 applications a day, 3-4 hours apart for 15 days, or according to medical advice.

WARNINGS: for nasal use. For personal use only. Do not use the product if the bottle appears to be damaged. Do not use the product after the expiry date. The expiry date refers to an intact, correctly stored product. Do not exceed the recommended dosage.

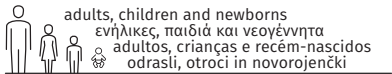

Do not use the product if you know you are sensitive to any of its components. In rare cases, temporary burning of the mucous membranes or slight nasal bleeding can occur. This will not compromise the safety and efficacy of the product. TONIMER STRONG ISOTONIC SPRAY (strong jet) should not be used on newborns and children unless advised by a doctor. It is not recommended for adults with particularly sensitive nasal mucous membranes or susceptibility to epistaxis. Stop using the product, consult your doctor and inform the manufacturer if side effects occur. If symptoms persist after treatment, consult your doctor. There are no contraindications related to using the product during pregnancy and breastfeeding. The product should only be used on newborns under paediatric advice. Drugs and medical devices for inhalation must only be taken simultaneously with the product under the supervision of a doctor who can assess possible interactions. In the event of serious accidents related to administration of one of the products from TONIMER ISOTONIC SPRAY line, please send a report to the manufacturer (customercare@ganassini.it), the Italian Ministry of Health or the competent authority of the EU member state or of the country in which the product was used. Avoid contact with the eyes; in the event of contact, rinse with water. Keep the product out of the reach and sight of children. Dispose of the device responsibly after use. **Store with the cap closed, away from heat, in a cool and dry place. Warning** Pressurised container: may burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Keep out of reach of children. Do not make use other than those specified.

GR_ΕΛΛΕΙΞΕΙΣ

Αποστερωμένο ισότονο διάλυμα θαλασσινού νερού με ελαφρύ αλκαλικό pH, ενδείκνυται για την απομάκρυνση και ρευστοποίηση της βλέννας στη ρινική κοιλότητα σε περιπτώσεις ξηρότητας των βλεννογόνων μεμβρανών και κρυολογημάτων και επομένως βοηθά τη διαδικασία της αναπνοής. Δεν περιέχει συντηρητικά και δεν ελευθεώνει πρωτεϊνικά (αέρα), καθώς δεν είναι σε επαφή με το προϊόν και μεινείται ελάχιστη αλλεργικής αντίδρασης.

Το προϊόν ενδείκνυται:

- οι συσκευασίες για ενήλικες TONIMER NORMAL ISOTONIC SPRAY και TONIMER STRONG ISOTONIC SPRAY
- η συσκευασία TONIMER SOFT ISOTONIC SPRAY για ενήλικες με υπερευαίσθητες βλεννογόνες μεμβράνες
- το TONIMER ISOTONIC BABY SPRAY για νεογέννητα και παιδιά.

Η παρουσία της μη αναστερευόμενης βαλβίδας που απομονώνει το φυσιολογικό διάλυμα:

- εγγυάται τη διατήρηση της αποστείρωσης.
- παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται το δοχείο σε οποιοδήποτε κατεύθυνση (360°)
- αποτρέπει τη βλέννα να εισέρχεται στο δοχείο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Πλύνετε τα χέρια σας πριν από τη χρήση.

1. Όταν αφαιρέσετε το καπάκι, παιδιά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν από μόνοι τους υπό την επίβλεψη ενήλικου μπορούν να το κάνουν, γυρνώντας το δοχείο σε οποιοδήποτε γωνία. Εφαρμόζεται καλύτερα, σκύνοντας πάνω από ένα νιφτάρ, με το κεφάλι να γέρνει προς τη μια πλευρά, εισάγετε το ακροφύσιο στο ρουθούνι που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο. Πιέστε το ακροφύσιο μέχρι το προϊόν να ψεκαστεί σύμφωνα με τη συνιστώμενη διάρκεια (βλέπε διάρκεια χρήσης και συχνότητα χρήσης).

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για το άλλο ρουθούνι (σχέδιο 1).

2. Για νεογέννητα και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια από ενήλικα: Κρατήστε το παιδί γυρνώντας το στην μια πλευρά, εισάγετε το ακροφύσιο στο ρουθούνι που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο και πιέστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τη συνιστώμενη διάρκεια (σχέδιο 2).

3. Μετά από τη χρήση, πάντοτε να πλένετε και να στεγνώνετε το ακροφύσιο και να κλείνετε το δοχείο χρησιμοποιώντας το πώμα του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

- TONIMER NORMAL ISOTONIC SPRAY (ενήλικες): πιέστε το ακροφύσιο για 1-2 δευτερόλεπτα/ρουθούνι. Η συνιστώμενη συχνότητα είναι 2-3 εφαρμογές κάθε μέρα με διάφορα 3-4 ώρες μεταξύ τους για 15 μέρες, ή σύμφωνα με την ιατρική συμβουλή.
- TONIMER SOFT ISOTONIC SPRAY (ενήλικες): πιέστε το ακροφύσιο για 5 δευτερόλεπτα/ρουθούνι. Η συνιστώμενη συχνότητα είναι 2-3 εφαρμογές κάθε μέρα με διάφορα 3-4 ώρες μεταξύ τους για 15 μέρες, ή σύμφωνα με την ιατρική συμβουλή.
- TONIMER STRONG ISOTONIC SPRAY (ενήλικες): πιέστε το ακροφύσιο για 1 δευτερόλεπτο/ρουθούνι. Η συνιστώμενη συχνότητα είναι 2-3 εφαρμογές κάθε μέρα με διάφορα 3-4 ώρες μεταξύ τους για 15 μέρες, ή σύμφωνα με την ιατρική συμβουλή.
- TONIMER ISOTONIC BABY SPRAY (βρέφη και παιδιά): πιέστε το ακροφύσιο για 5 δευτερόλεπτα/ρουθούνι. Η συνιστώμενη συχνότητα είναι 2-3 εφαρμογές κάθε μέρα με διάφορα 3-4 ώρες μεταξύ τους για 15 μέρες, ή σύμφωνα με την ιατρική συμβουλή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Για ρινική χρήση. Για προσωπική χρήση μόνο. Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν αν το δοχείο φαίνεται καταστραμμένο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε ένα σκόνη, κατάλληλα αποθηκευμένο προϊόν. Μην υπερβείτε τη συνιστώμενη δόση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχετε ότι έχετε ευαισθησίες σε οποιοδήποτε συστατικό του. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να νιώσετε προσωρινά κνησμό στο βλεννογόνο ή να προκληθεί μικρή ρινική αιμορραγία. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. TONIMER STRONG ISOTONIC SPRAY (πρωτόγνωστη υψηλή πίεση) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε νεογέννητα και παιδιά εκτός και αν σας πει ο γιατρός σας. Δεν συνιστάται σε ενήλικες με ιδιαίτερα ευαίσθητο βλεννογόνο ή επηρεασί σε ανοσορραγία. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, συμβουλευτείτε το γιατρό σας και ενημερώστε τον κατασκευαστή αν εμφανίσετε παρενέργειες. Αν τα συμπτώματα παραμένουν μετά τη θεραπεία συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Δεν υπάρχουν αντενδείξεις για χρήση του προϊόντος κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε νεογέννητα υπό την επίβλεψη παιδίατρου. Εισπνεόμενα φάρμακα ή ιατροτεχνολογικά προϊόντα, πρέπει να λαμβάνονται ταυτόχρονα με το προϊόν υπό την επίβλεψη γιατρού που μπορεί να αξιολογήσει πιθανές αλληλεπιδράσεις. Σε περίπτωση σοβαρών συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη χρήση/ιστοποίηση προϊόντος της σειράς TONIMER ISOTONIC SPRAY, σας παρακαλού στείlate αναφορά στον κατασκευαστή (customercare@ganassini.it), το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας, ή την αρμόδια αρχή του μέλους της ΕΕ ή της χώρας στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής (επώλετε με νερό. Κρατήστε το προϊόν σε σημείο που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά. Αποφύγετε τη συνεχή υπεύθυνση μετά τη χρήση. **Αποθηκεύστε με το πώμα κλειστό, μακριά από ζέση σε δροσερό, ξηρό μέρος. Προσοχή** Δοχείο υπό πίεση: Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές αναφλέξης. Μην καπνίζετε. Να μην τρυπήθεί ή κοπεί σκόνη και μετά τη χρήση. Να προστατευτείται από τις ακραίες ακτίες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Μην κάνετε χρήση εκτός της προβλεπόμενης.

PT_INDICAÇÕES

Solução isotônica estéril de água do mar, com pH ligeiramente alcalino, destinada a remover e fluidificar o muco das fossas nasais, nos casos de secura da mucosa e nas constipações, a fim de promover uma respiração mais confortável.

CLIENT: TONIMER ISOTONIC NORMAL / BABY EXPORT 1 SPRAY 300 LETTERATURA vendita FORMATO 180 X 240 mm
DATE: 06.2024 Fornitore: DERMOFARM COD M30078900

N° COLORI :	1	NERO	BIANCA
-------------	---	------	--------

Não contém conservantes e o propelente (ar) não vem no jato, dado que não está em contacto com o produto, reduzindo assim as possibilidades de reação alérgica.

Indicações de produtos Tonimer:

- TONIMER ISOTONIC SPRAY NORMAL e TONIMER ISOTÔNICO SPRAY STRONG, para adultos;
- TONIMER ISOTÔNICO SPRAY SOFT, indicado em adultos com mucosa hipersensível;
- TONIMER ISOTÔNICO SPRAY BABY, indicado em recém-nascidos e crianças.

A presença de um válvula anti-retorno e de uma bolsa que isola a solução:

- garantir a esterilidade
- permite rodar o frasco em qualquer direção (360°)
- impede que o muco seja aspirado para o interior do frasco.

MODO DE APLICAÇÃO:

Lavar as mãos antes de usar.

1. Após retirar a tampa, as crianças capazes de usar o produto de modo autónomo (com a supervisão de um adulto), podem usar o produto, orientando o aplicador em qualquer ângulo. Recomenda-se no entanto que se coloque por cima do lavatório e ter a cabeça inclinada para um lado, inserindo o aplicador na narina superior. Premir o aplicador, durante o tempo previsto (ver tempo de aplicação e frequência de utilização) para permitir a saída do produto. Repetir o procedimento com a outra narina (desenho 1).
2. Para recém nascidos e crianças, que necessitam da assistência de um adulto, colocar o bebé de lado e inserir o aplicador na narina superior e premir durante o tempo previsto. Colocar o bebé do outro lado e repetir o procedimento na outra narina (desenho 2).
3. Após cada utilização, lavar e secar o aplicador e fechar com a tampa.

TEMPO DE APLICAÇÃO E FREQUÊNCIA

- TONIMER ISOTÔNICO SPRAY NORMAL (adultos): Premir o aplicador 1-2 segundos em cada narina. Aconselha-se 2-3 aplicações/dia, em intervalos de 3-4 horas, durante 15 dias ou de acordo com indicação médica.
- TONIMER ISOTÔNICO SPRAY SOFT (adultos): Premir o aplicador 5 segundos em cada narina. Aconselha-se 2-3 aplicações/dia, em intervalos de 3-4 horas, durante 15 dias ou de acordo com indicação do médico.
- TONIMER ISOTÔNICO SPRAY STRONG: Premir o aplicador 1 segundo em cada narina. Aconselha-se 2-3 aplicações/dia, em intervalos de 3-4 horas, durante 15 dias ou de acordo com indicação médica.
- TONIMER ISOTÔNICO BABY SPRAY (recém-nascidos e crianças): Premir o aplicador 5 segundos em cada narina. Aconselha-se 2-3 aplicações/dia, em intervalos de 3-4 horas, durante 15 dias ou de acordo com indicação médica.

ADVERTÊNCIAS: uso nasal. Uso pessoal. Não usar o produto se o frasco estiver danificado. Não usar o produto após data de validade. A data de validade, refere-se ao produto inteiro e corretamente conservado. Não exceder a dose recomendada. Em caso de hipersensibilidade aos componentes, não usar o produto. Em raros casos, durante a sua utilização, pode ocorrer uma sensação de queimadura nas mucosas ou ligeiro sangramento nasal, contudo não compromete a segurança e eficácia do produto. TONIMER ISOTONIC SPRAY STRONG (jato forte) não deve ser usado em recém-nascidos e crianças, exceto por indicação médica. Não se aconselha o seu uso em adultos com mucosa nasal particularmente sensível e sujeita a epistaxis. Em caso de efeitos indesejáveis, suspender a sua utilização, consultar o médico e informar o fabricante. Em caso de persistência dos sintomas no fim do tratamento, consultar o médico. Não existem contra-indicações relacionadas com a sua utilização em grávidas e durante o aleitamento. Nos recém-nascidos utilizar o produto só por aconselhamento pediátrico. A administração de fármacos e dispositivos médicos de uso inalatório em simultâneo com Tonimer, deve ser feita sob controlo médico, de modo a avaliar possíveis interações. Em caso de incidentes graves que ocorram com a administração de qualquer produto da linha TONIMER ISOTÔNICO SPRAY, enviar

informação para o fabricante (customercare@ganassini.it), ao Ministério da Saúde Italiano ou à Autoridade competente do Estado Membro da EU em que foi utilizado o produto ou do País em que foi utilizado o produto. Evitar o contato com os olhos, no caso de tal acontecer, lavar com água. Manter o produto fora do alcance e da vista das crianças. Após o uso descartar o dispositivo de modo responsável. **Conservar fechado, ao abrigo do calor, em local fresco e seco. Atenção** Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Manter afastado do calor, superfícies quentes, fagulhas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar, não furar, nem queimar, mesmo após utilização. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Manter fora do alcance das crianças. Não usar de modo diferente do indicado.

SI_INDICACIJE

Sterilna izotonična raztopina morske vode s rahlo alkalnim pH, priporočljiva za odstranjevanje in mehčanje sluzi v nosnih poteh ob suhosti sluznic ter prehladih, s tem pa omogoča bolj udobno dihanje. Izdelek ne vsebuje konzervansov in potisnega plina v stiku s proizvodom, s čimer se zmanjša možnost alergijskih reakcij, izdelek je primeren:

- za odrasle: TONIMER NORMAL ISOTONIC PRŠILO in TONIMER STRONG ISOTONIC PRŠILO;
- za odrasle z občutljivo sluznico: TONIMER SOFT ISOTONIC PRŠILO;
- za novorojenčke in otroke: TONIMER BABY ISOTONIC PRŠILO.

Pristnost nepovratnega ventila in vrečke, ki izolira fiziološko raztopino:

- zagotavlja sterilnost;
- omogoča uporabo stekleničke v kateri koli smeri (360°);
- preprečuje, da bi se sluz sesala nazaj v stekleničko.

NAVODILA ZA UPORABO:

Pred uporabo si umijte roke.

1. Ko odstranite zaščitni pokrovček, otroci, ki lahko samostojno uporabljajo izdelek (pod nadzorom odrasle osebe), nagnite stekleničko pod katerimkoli kotom. Najbolje je uporabiti izdelek tako, da se nagnete nad umivalnik, nagnete glavo na eno stran in vstavite pršilni nastavek v zgornjo nosnico. Pršilnik pritiskate in razpršite izdelek za priporočeni čas (glejte čas pršenja in pogostost uporabe). Postopek ponovite v drugi nosnici (slika 1).
2. Za novorojenčke in otroke, ki potrebujejo pomoč odraslih: položite otroka na bok, vstavite pršilni nastavek v zgornjo nosnico in pritiskate za priporočeni čas. Otroka obrnite na drugo stran in postopek ponovite v drugi nosnici (slika 2).
3. Po uporabi vedno sperite in posušite pršilni nastavek ter zaprite stekleničko s priloženim pokrovčkom.


ČAS PRŠENJA IN POGOSTOST UPORABE

- TONIMER NORMAL ISOTONIC PRŠILO (odrasli): pritiskate na pršilnik 1-2 sekundi/nosnico. Priporočena pogostost je 2-3 aplikacije na dan, razmak med aplikacijami naj bo 3-4 ure, in to za obdobje 15 dni ali po medicinskem nasvetu.
- TONIMER SOFT ISOTONIC PRŠILO (odrasli): pritiskate na pršilnik 5 sekund/nosnico. Priporočena pogostost je 2-3 aplikacije na dan, razmak med aplikacijami naj bo 3-4 ure, in to za obdobje 15 dni ali po medicinskem nasvetu.
- TONIMER STRONG ISOTONIC PRŠILO (odrasli): pritiskate na pršilnik 1 sekundo/nosnico. Priporočena pogostost je 2-3 aplikacije na dan, razmak med aplikacijami naj bo 3-4 ure, in to za obdobje 15 dni ali po medicinskem nasvetu.
- TONIMER BABY ISOTONIC PRŠILO (dojenčki in otroci): pritiskate na pršilnik 5 sekund/nosnico. Priporočena pogostost je 2-3 aplikacije na dan, razmak med aplikacijami naj bo 3-4 ure, in to za obdobje 15 dni ali po medicinskem nasvetu.

OPOMBLA: Za uporabo v nosu. Izdelek je namenjen izključno osebni uporabi. Ne uporabljate izdelka, če je steklenička poškodovana. Ne uporabljate izdelka po preteku roka uporabe. Rok uporabe se nanaša na nepoškodovan, pravilno shranjen izdelek. Ne prekoračite priporočene

odmerka. Ne uporabljajte izdelka, če veste, da ste občutljivi na katero koli od njegovih sestavin. V redkih primerih se lahko pojavijočasno pekoč občutek na sluznici ali rahlo kihanjeje e nosu. To ne vpliva na varnost in učinkovitost izdelka. TONIMER STRONG ISOTONIC PRŠILO (razpršilni curek z visokim pritiskom) se ne sme uporabljati pri novorojenčkih in otrocih, razen če to priporoči zdravnik. Ni primeren za odrasle s posebej občutljivo nosno sluznico ali nagnjenostjo k epistaksi. Prenehajte z uporabo izdelka, posvetujte se z zdravnikom in obvestite proizvajalca, če se pojavijo stanski učinki. Če simptomi vztrajajo po terapiji, se posvetujte z zdravnikom. Ni kontraindikacij za uporabo izdelka med nosečnostjo in dojenjem. Izdelek naj uporabljajo pri novorojenčkom samo pod pediatričnim nadzorom. Zdravila in medicinski pripomočki za inhalacijo se smejo jemati sočasno s tem izdelkom le pod nadzorom zdravnika, ki lahko oceni možne interakcije. V primeru resnih nesreč, povezanih z uporabo katerega koli izdelka iz linije TONIMER ISOTONIC, pošljite poročilo proizvajalcu (customercare@ganassini.it), italijanskemu ministrstvu za zdravje ali pristojnemu organu države članice EU ali države, v kateri je bil izdelek uporabljen. Izbijajte se stiku z očmi; v primeru stika izperite z vodo. Hranite izdelek izven dosega in pogleda otrok. Po uporabi izdelka ga odstranite odgovorno. **Shranjujte s zaprtim pokrovčkom, ločeno od toplote na hladnem in suhem mestu. Opazujte** Posoda je pod tlakom: lahko eksplozija pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vžroh površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne preuknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F. Hraniti izven dosega otrok. Uporabiti samo za predvidene namene.

INGREDIENTS:
Aqua (Water), Maris Aqua (Sea Water)
27,32%.

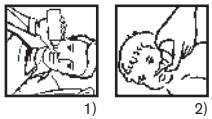

CE 0477 STERILE R MD

Ed. 06/2024 - Cod. M30078900

ISTITUTO GANASSINI S.p.A. di Ricerche Biochimiche
via P. Gaggia, 16 - 20139 Milano - Italy
www.ganassinicorporate.com

Distribuidor Exclusivo em Portugal: **DERMOTECA**
Produtos Químicos e Dermatológicos, S.A.
Rua Castilho, n. 59-1º Esq. - 1250-068 LISBOA
Ekskluzivni dobavitelj za Slovenijo:
PHARMAGEA D.O.O. Litostrojska cesta 40,
1000 Ljubljana - www.pharmagea.com
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Κύπρου:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΤΔ
Άρεως 50, Λατσιά 2234, Λευκωσία
Τηλ: 22 75 72 77 - Φαξ: 22 75 36 44
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:
"EPSILON HEALTH" ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ι.Κ.Ε.
Κ. Παλαμά 4, Πυλαία, 555 34 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 941 150, F: 2310 922 553 - www.epsilon-health.gr

CLIENT: TONIMER ISOTONIC NORMAL / BABY EXPORT 1 SPRAY 300 LETTERATURA vendita FORMATO 180 X 240 mm
DATE: 06.2024 Fornitore: DERMOFARM COD M30078900

N° COLORI :	1	NERO	VOLTA
-------------	---	------	-------